



Pour visionner une vidéo détaillée sur l'utilisation correcte de SYMBICORT® TURBUHALER®, balayez le code QR ou visitez le **Symbicort.ca**

Symbicort®

budesonide/fumérate
de formotérol d'hydrate

Mode d'emploi de l'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER

Préparation d'un NOUVEL inhalateur avant la première utilisation

Vous devez préparer votre NOUVEL inhalateur avant de l'utiliser pour la première fois.



Dévissez et enlevez le couvercle.

Vous pourriez entendre un léger bruit lorsque vous dévissez le couvercle. C'est normal.



Tenez l'inhalateur à la verticale par la partie centrale. Ne tenez pas l'inhalateur par l'embout buccal.

Tournez la molette rouge le plus loin possible dans une direction, puis le plus loin possible dans la direction opposée. À un certain moment, vous entendrez un clic.

Répétez le processus une fois de plus.


Vous ne devez préparer votre NOUVEL inhalateur que lors de sa première utilisation.

Administration d'une dose



Dévissez et enlevez le couvercle.

Vous pourriez entendre un léger bruit lorsque vous dévissez le couvercle. C'est normal.

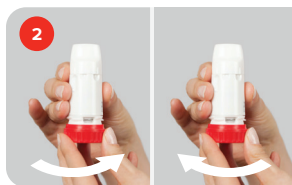

Tenez l'inhalateur à la verticale par la partie centrale. Ne tenez pas l'inhalateur par l'embout buccal.

Tournez la molette rouge le plus loin possible dans une direction, puis le plus loin possible dans la direction opposée. La direction dans laquelle vous tournez la molette en premier n'a aucune importance. La dose est maintenant chargée. À un certain moment, vous entendrez un clic.



Expirez en gardant la bouche éloignée de l'embout buccal. Ensuite, placez doucement l'embout buccal entre les dents et refermez les lèvres autour de ce dernier.



Inspirez aussi vivement et profondément que vous le pouvez. Avant d'expirer, retirez l'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER de votre bouche.

Répétez les étapes 2 à 4 si vous devez prendre plus d'une dose.

Après avoir pris le nombre de doses prescrites par votre médecin, revissez le couvercle sur l'inhalateur et rincez-vous la bouche avec de l'eau (sans l'avaler).

FOIRE AUX QUESTIONS SUR SYMBICORT TURBUHALER

Qu'arrive-t-il si je tourne la molette rouge trop de fois?

Ne vous en faites pas si, par inadvertance, vous tournez la molette trop de fois – vous ne chargerez pas plusieurs doses. L'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER est conçu pour vous empêcher de charger plus d'une dose à la fois.

Qu'est-ce qui cause le cliquetis?

Le léger bruit est dû à l'agent dessiccant, et non au médicament.

Qu'arrive-t-il si j'échappe l'inhalateur?

Si vous échappez ou agitez accidentellement l'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER, ou si vous expirez dans votre inhalateur après avoir chargé une dose, la dose sera perdue. Dans ce cas, chargez tout simplement une nouvelle dose.

Dois-je tourner l'embout buccal?

N'essayez pas d'enlever ou de tourner l'embout buccal inutilement. Il est fixé à l'inhalateur et ne doit pas être retiré.

Suis-je censé goûter le médicament?

Même si vous suivez les instructions à la lettre, il se peut que vous ne sentiez pas le médicament passer ou qu'il ne goûte rien; cela est courant.

Comment dois-je interpréter ce qui s'affiche sur l'indicateur de doses de l'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER?

L'inhalateur SYMBICORT TURBUHALER est muni d'une petite fenêtre qui vous indique le nombre de doses restantes dans l'inhalateur. L'indicateur de doses bouge lentement chaque fois que vous chargez une dose.



Chaque 20^e dose est indiquée par un nombre.

Chaque 10^e dose est indiquée par un tiret.

Quand le chiffre « 0 » sur fond rouge atteint le milieu de la fenêtre repère, il est temps de jeter l'inhalateur.



En savoir plus sur **SYMBICORT TURBUHALER**